

HOCHREINE FRAKTIONIERTE SILIKONÖLE




Arcad lässt Ihnen die Wahl



ARCIOLANE
2 Viskositäten



1300 cSt
5500 cSt

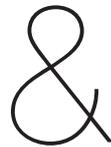

DIE GEWISSHEIT

EIN HOCHREINES UND FRAKTIONIERTES ÖL ZU VERWENDEN

Der Fraktionierungsprozess entfernt Verunreinigungen und Polymere, die in klinischen Studien als teilweise toxisch eingestuft werden.


Gewährleistet eine anspruchsvolle Qualität, die den Anforderungen entspricht.

	FDA Ansprüche *	ARCIOLANE
Niedrige Molekulargewichte unter D9 oder unter 666 g.mole-1	< 200 ppm	< 150 ppm
Leistungswiderstand	> 1.10 ¹⁴ ohm. cm	>1.10 ¹⁴ ohm. cm
Volatilität	<1 %	<0,1%

* Eigenschaften eines in den vereinigten Staaten registrierten Produkts.

Gewährleistung für eine bessere Verträglichkeit.

	Rohöl	ARCIOLANE
niedrige Molekulargewichte enthalten von D4 bis D9	148 ppm	≤ 10 ppm
Polydispersitätsindex	2,04	1,86

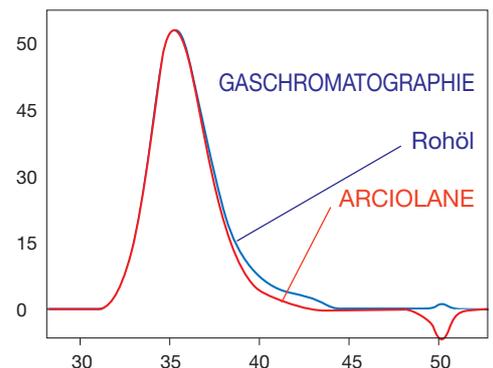

ARCIOLANE
2 Aufmachungen



Fläschchen
Spritze



&

DIE GEWISSHEIT
EINER ERHÖHTEN SICHERHEIT

OHNE CHLOROBUTYL OHNE LATEX OHNE PHTHALAT

KAPSEL ODER KOLBEN AUS REINEM SILIKON

KEIN EXTRAHIERBARES
PHENYLDERIVAT

•

*GEGOSSENES GLAS
PHARMAKOPÖEGEMÄSS*

BRUCHSICHER, STOSSFEST

•

*LUER-LOCK ANSATZ AUS
ROSTFREIEM STAHL*

*KANN NICHT VERSEHENTLICH
ABGETRENNT WERDEN*



EINE UNVERGLEICHLICHE WAHL VON ZUBEHÖRTEILEN

STERIL - EINMALIGER GEBRAUCH

ARC Verbindungsreihe für alle Vitrektomie Geräte

schnell und einfach :

Mit einer Kanüle geliefert 20G, stumpfes Kanüleneende : • 1 den weissen stopper hinter auf die Spritze setzen • 2 einraten • 3 mit der Leitung verbinden



Referenz	Verbindung		Kompatibilität
ARC 510	fixiert Luer-Lock männlich/weiblich		Associate * - Harmony* *(Dorc) OpenPhaco (Corneal) Premiere (Storz) - Sto (Alcon) Penthasis (Ioltech) - Antarès (Opticon)
ARC 520	drehbar		Accurus (Alcon)
ARC 530	drehbar		Millennium (B&L)
ARC 540	unbeweglich		Orbit (Oertli)

* Anpassungsteil A571 ist notwendig

APIS Verbindungsreihe für

ARCIOLANE Injektionspritzen.

Für alle Vitrektomie Geräte.



IM AUTOKLAV STERILISIERBAR
MEHRMALIGER GEBRAUCH
MÖGLICH

Kompatibilität		
APIS	Premiere (Storz) - Sto (Alcon) - Penthasis (Ioltech) - Antarès (Opticon)	
APIS + A 571	OpenPhaco (Corneal) - Associate (Dorc) Harmony (Dorc)	
APIS + A 572	Accurus (Alcon)	
APIS + A 573	Millennium (B&L)	
APIS + A 574	Orbit (Oertli)	

200A ALL-03 2011-12

nis Handgerät für ARCIOLANE Spritze.

Einfach, preiswert, für eine wirkungsvolle Kontrolle während der Einspritzung. Wieder sterilisierbar.



ARCAD
O P H T A®

Arcadophta 11, rue Antoine Ricord
31100 TOULOUSE - FRANCE
Tél. : +33 5 61 40 52 35
Fax : +33 5 61 40 84 66
E-mail : info@arcadophta.com
Skype : arcad4