


- 
- Optimierter Materialeinsatz
 - Zeitersparnis im OP
 - Standardisierung der Abläufe im OP
 - Reduzierung von Verpackungsabfall
 - Weniger Administration bei der Bevorratung von Einmalmaterial

Polyset[®] OP-Sets

Individuelle Abdecksysteme und Sets für alle Einsatzbereiche

Operations- und kundenspezifische Abdecksets und Einzelkomponenten mit höchster Qualität

Das OP-Set-Programm von Polytech Domilens umfasst neben den verschiedenen Einzelkomponenten auch ein umfangreiches Angebot von Abdecksets für alle ophthalmologischen Einsatzbereiche.


Wir fertigen für Sie u.a. die folgenden OP-Set-Varianten:

- Katarakt-Sets
- IVOM-Sets
- Vitrektomie/PPV-Sets
- Lasik-Sets
- LID-Sets
- Instrumenten-Sets
- Chalazion-Sets
- Spezial-Sets auf Anfrage

Wir inkludieren einfache und selbstklebende Abdecktücher sowie komplette Abdecksysteme nach Kundenwunsch. Ebenso gehören Armlehnenbezüge und Tischsäcke/-abdeckungen zu unserem Sortiment.

Die hochwertigen Komponenten im Überblick


SMS

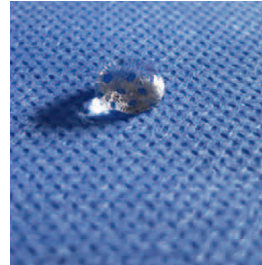

Vierlagiges, flüssigkeitsabweisendes und zugleich atmungsaktives Vlies, anwendbar bei kürzeren Eingriffen. Bevorzugtes Material sowohl für Abdecksysteme als auch für OP-Kittel.

Technische Daten

Gewicht:	45 g/m ²
Reißfestigkeit:	90 N/5 cm
Dehnbarkeit:	50 %
Wassersäule:	40 cm H ₂ O
Verfügbare Breite:	1.600 mm

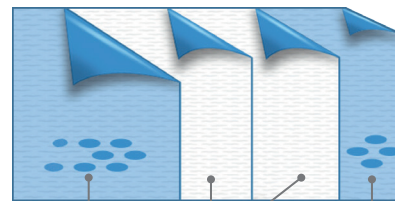

flüssigkeitsabweisendes Vlies

Vlies

flüssigkeitsabweisendes Vlies



Spunlace



Flüssigkeitsabweisendes Vlies für hohen Patientenkomfort und Sicherheit. Ein einlagiges Material, das sehr gut für kleinere Operationseingriffe von kürzerer Dauer und bei minimalen Flüssigkeitsaufkommen geeignet ist.

Biplex




Zweilagiges Material mit saugender Vlies-Oberseite und wasserdichter PE-Unterseite als optimale Keimbarriere. Gut anzuwenden bei kurzen bis längeren Eingriffen sowie sehr gut als Tischabdeckung und OP-Set-Einschlag geeignet.

Technische Daten

Gewicht:	68 g/m ²
Reißfestigkeit:	3120 N/5 cm
Dehnbarkeit:	33 %
Wassersäule:	40 cm H ₂ O
Verfügbare Breiten:	1.100 mm / 1.340 mm / 1.600 mm / 1.900 mm

Technische Daten

Gewicht:	55 g/m ²
Reißfestigkeit:	35 N/2,5 cm
Dehnbarkeit:	10 %
Verfügbare Breiten:	1.100 mm / 1.500 mm 1.800 mm

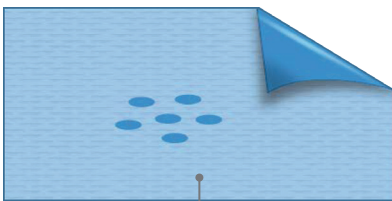

flüssigkeitsabweisendes
Vlies




saugendes
Vlies

wasserdichte
Folie




Sterisheet

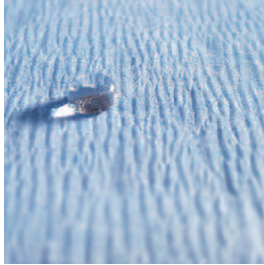

Medizinisches, imprägniertes Krepp-Papier, das als Abdecktuch sowie Einschlag verwendet wird. Sehr sicheres Einwegmaterial mit hervorragender Bakterien-Barriere und einer guten Dichte. Alkoholabweisend und antistatisch.

Technische Daten

Gewicht:	52 g/m ²
Reißfestigkeit:	800 N/m
Dehnbarkeit:	5 %
Wassersäule:	30 cm H ₂ O
Verfügbare Breite:	1.500 mm

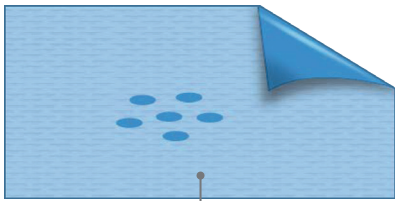

imprägniertes Krepp-Papier


OP-Zubehör

- Augenkomresse
- Augentupfer
- Becher und Schalen
- Einmalhandtücher
- Filter
- Handschuhe
- Instrumentenwisch Tuch
- Inzisionsfolie
- Kanülen
- Keiltupfer
- Kittel
- Klingen und Messer
- Lidsperrer
- Markierstift
- Messinstrument
- Mulltupfer
- Mull- und Vlieskompressen
- Pinzetten
- Spritzen

Weitere Komponenten können bei Bedarf ebenfalls inkludiert werden. Bitte sprechen Sie uns hierzu direkt an!

Stanzformen und -formate

Rechteck

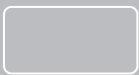

14 x 10 cm
17,5 x 8 cm
7 x 10 cm
20 x 3 cm
17,5 x 6,5 cm
20 x 10 cm
20 x 17 cm

Quadrat



10 x 10 cm
12,5 x 12,5 cm

Oval



3,4 x 6,2 cm
4 x 7 cm
6 x 8 cm
7 x 10 cm
6 x 12 cm

Kreis



Ø 3 cm
Ø 5 cm
Ø 6 cm
Ø 7,5 cm
Ø 10 cm

Haus



11,5 x 8,5 cm

Hexagon



11,5 x 8,5 cm



Unsere Vorteile für Sie im Überblick

- **Hohe Qualität** – Alle unsere OP-Sets sind ausschließlich „Made in Germany“ und werden unter Einhaltung strenger QM-Vorgaben gefertigt. Die aufwendige Herstellung garantiert hochwertigste Qualität.
- **Liefergarantie** – Für die Fertigung der individuellen OP-Sets stehen gleich zwei Hersteller zur Verfügung, so ist eine stetige Belieferung mit OP-Sets für unsere Kunden garantiert.
- **Individuell** – Um Ihren OP-Alltag zu erleichtern, fertigen wir nach Ihren individuellen Wünschen ein kundenspezifisches OP-Set an. Wir halten ständig ein umfangreiches Sortiment verschiedener Artikel für Sie bereit. Ihre Vorgaben sind unser Maßstab. Sie geben an, welche Artikel und Materialien in Ihrem Set sein sollen – die Reihenfolge wählen Sie.
- **Flexibel** – Ihr persönliches OP-Set können wir nach Ihren speziellen und individuellen Anforderungen fertigen.
- **Just-in-Time** – Wir garantieren pünktliche Lieferung an den von Ihnen vorgegebenen Wunschterminen.
- **Ökonomisch** – Individuell gepackte OP-Sets sparen Zeit im OP und in der Verwaltung der Vorräte.
- **Umweltbewusst** – Spezifisch zusammengestellte und verpackte Abdecksets vermindern den Verpackungsabfall gegenüber Einzelkomponenten.

Standard-IVOM-Set

Sie suchen ein möglichst kompaktes IVOM-Set, welches nur mit den notwendigen Artikeln bestückt ist? Unsere Lösung dafür: unser standardisiertes IVOM-Set – jederzeit von Ihnen abrufbar!

Speziell für intravitreale Injektionen zusammengestellt:

Packschema			Artikelnummer: MKA-DEBAAI01-02 / Verpackungseinheit: 100 Stück im Karton		
Anzahl	Beschreibung	Abmessungen			
1	Einschlag Krepp	60 x 60 cm			
1	Abdecksystem, Inzisionsfolie perforiert	40 x 40 cm			
4	Pro-Ophta-Stäbchen				
1	Nobalumenal Augenkomresse	75 x 80 mm			
1	Einmalmess- und Fixierinstrument Plastik	3,5/4mm			
1	Lidsperrer „Solid Blade“ gewinkelt				

Testmuster und Beratung

Selbstverständlich ist es auch möglich, vorab unsterile bzw. sterile Testmuster zu erhalten:

- **Unsterile Muster** – für einen ersten Überblick, ob der Inhalt der Sets und die Tuchmaße Ihren Wünschen entsprechen.
- **Sterile Muster** – für die erfolgreiche Erprobung der Sets im OP.

Kontaktieren Sie uns unter op-set@polytech-domilens.de für die persönliche Zusammenstellung Ihres individuellen OP-Sets. Gerne unterstützen wir Sie bei der Zusammenstellung Ihres individuellen OP-Sets!

Vertrieb durch:

Polytech Domilens GmbH
 Arheilger Weg 6
 64380 Roßdorf, Deutschland
 T +49 6154 69990
info@polytech-domilens.de
www.polytech-domilens.de



Hersteller:

MED
Medical Products GmbH
 Am Sportplatz 9
 63791 Karlstein
 Deutschland
www.med-products.de

Biocon
Medizintechnik GmbH
 Triebweg 1-3
 63933 Mönchberg
 Deutschland
www.biocon-online.de

