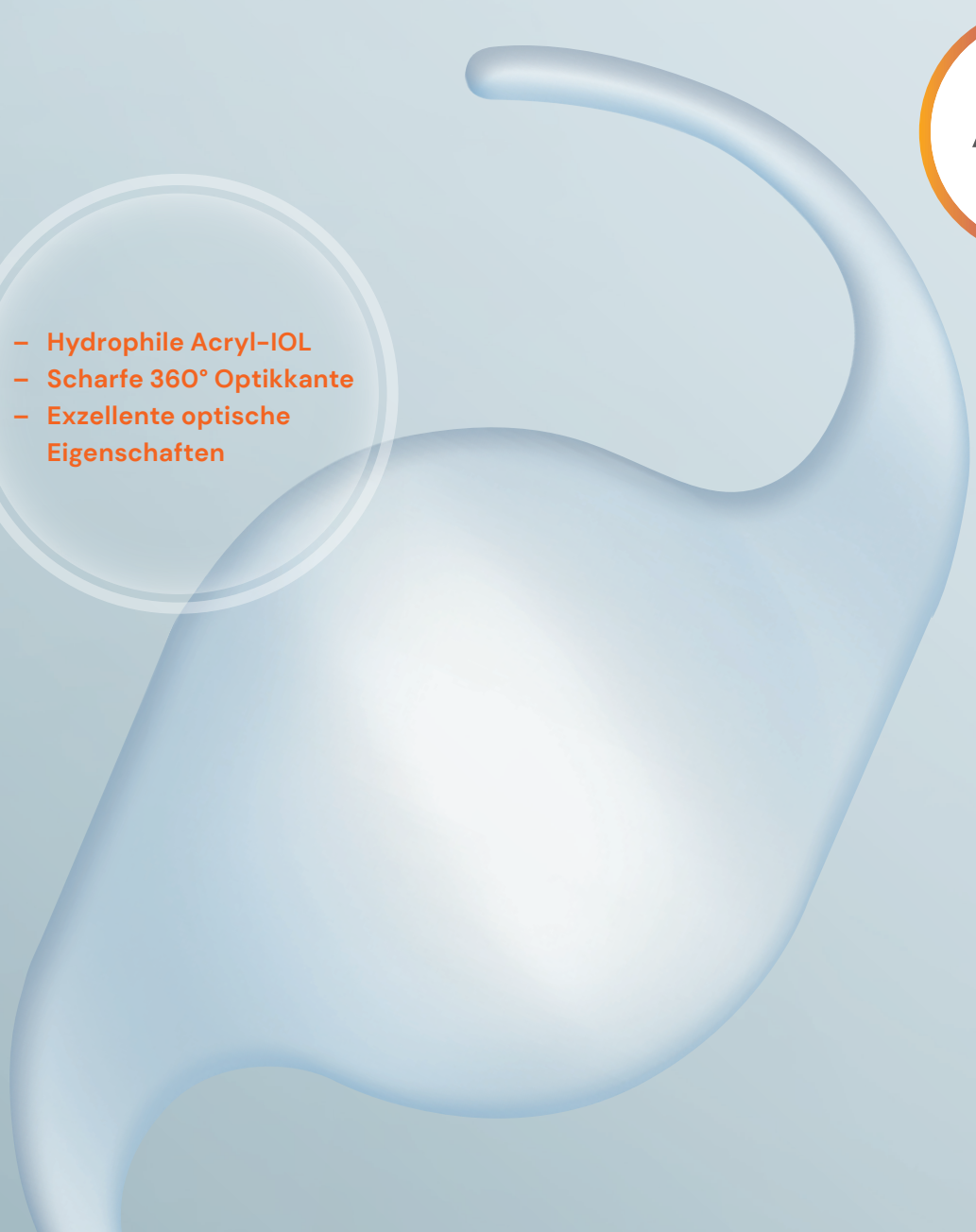




- 
- A large, stylized, light blue graphic of a human eye, shown from a side profile, occupies the central portion of the page. It has a smooth, flowing shape with a prominent iris and a curved eyelid.
- Hydrophile Acryl-IOL
 - Scharfe 360° Optikkante
 - Exzellente optische Eigenschaften

AIALA – einteilige hydrophile Acryl-IOL, sphärisch und farblos

Ihre hydrophile Basis-Linse.

AIALA – die hydrophile sphärische Linse von AJL

- Hohe Biokompatibilität
- 360° scharfe Kante zur Nachstarprophylaxe
- Exzellente optische Qualität

Technische Spezifikationen AIALA

Linsentyp:	einteilig
Gesamtdurchmesser:	12,50 mm
Optik:	Durchmesser: 6,0 mm Material: hydrophiles Acryl-Copolymer (25,5 %), farblos Design: sphärisch, bikonvex, 360° scharfe Kante UV-Filter: ja
Haptik:	Design: C-Schleufe Material: hydrophiles Acryl-Copolymer Anwinkelung: 0°
Dioptriebereich:	Abstufung 0,5 D: +12,5 bis +25,0 D Abstufung 1,0 D: –6,0 bis +40,0 D
Refraktiver Index:	1,46
Injektor / Kartusche:	Medicel Accuject 2.2 Einmalsystem
CE:	0318

Optimierte IOL-Konstanten für den Zeiss IOL-Master

nominal	Haigis			Hoffer Q	Holl. 1	SRK/T
117,3	a0 = 0,95	a1 = 0,40	a2 = 0,10	pACD = 4,56	SF = 1,37	A = 118,0

Quelle: Hersteller

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgeführten Konstanten der Intraokularlinsen (IOL) um Empfehlungen handelt. Diese Richtwerte sind nur als Basis für die Berechnung der IOL-Brechkraft zu betrachten. Aufgrund von Erfahrungen und Implantationstechnik sollte jeder Operateur seine eigenen Werte ermitteln. Angaben zur Berechnung eigener Konstanten sind unter folgendem Link zu finden: <https://iolcon.org>

Vertrieb durch:

Polytech Domilens GmbH
 Arheilger Weg 6
 64380 Roßdorf, Deutschland
 T +49 6154 69990
info@polytech-domilens.de
www.polytech-domilens.de



Hersteller:

AJL OPHTHALMIC, S.A.
 Parque Tecnológico
 de Álava
 Ferdinand Zeppelin 1,
 01510 Miñano, Álava
 Spanien